


Firma		Information		Verfahrensdaten		Freigabe	
Name	SLI Service GmbH St. Josef Krankenhaus	Gerätename	RDT2	Beginn	01.10.2009 12:33:12	Prozessbeurteilung	Zufriedenstellend
Straße	Ringstr. 60	Firma	Miele & Cie. KG	Ende	01.10.2009 13:49:41	Produktfreigabe	Ja
Postleitzahl	5280	Typ	Profitronic	Dauer	01:16:29	Freigegeben durch	PDI INVITEC
Stadt	Braunau	Version	1.0	Status	Zyklus beendet	Freigegeben am	01.10.2009 13:49:42
Land	A	Herstellernummer	018342823	Chargen-Nr.	C003386		
				Programm	INSTRUMENTE		

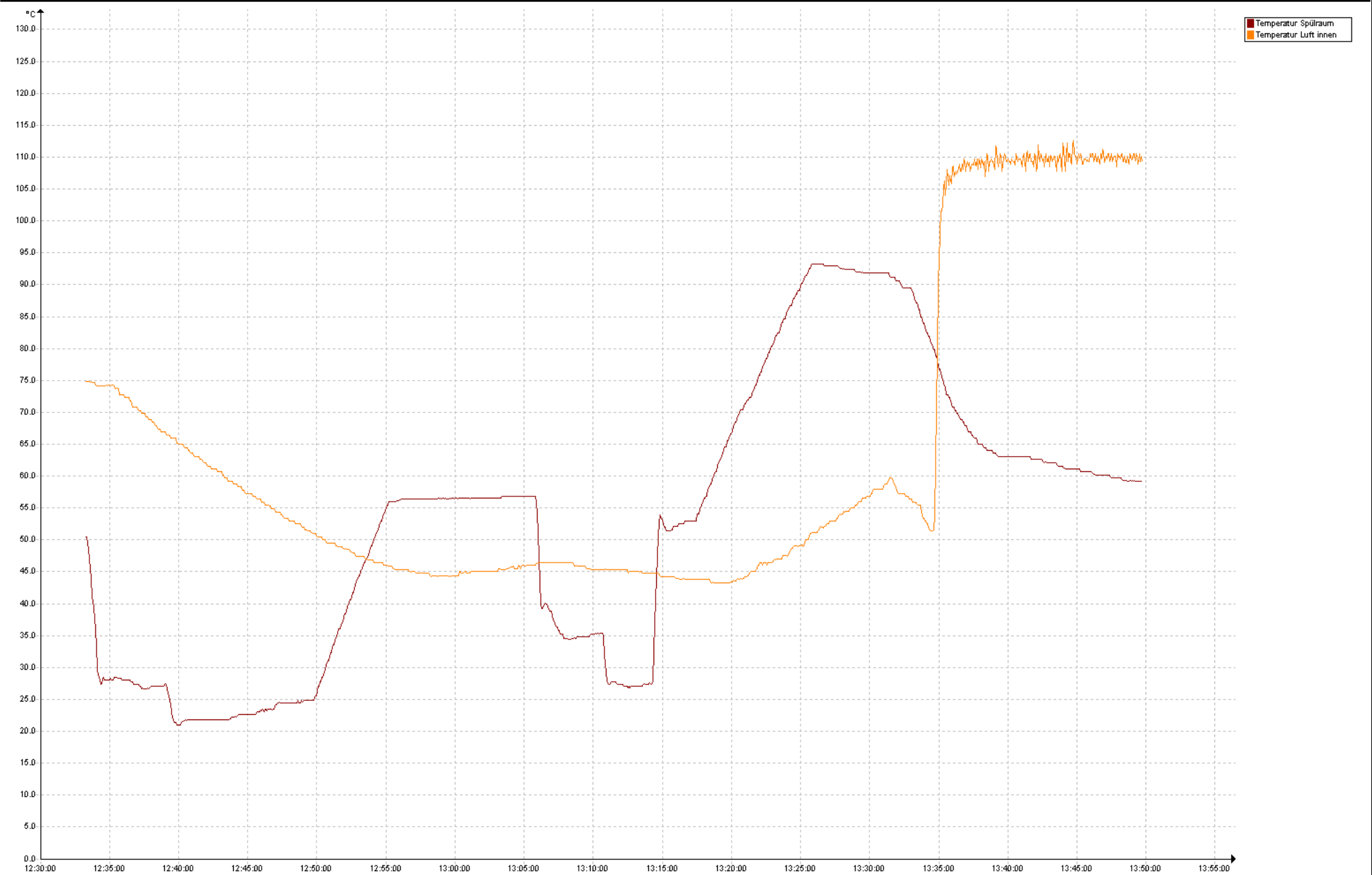

Firma	Information	Verfahrensdaten	Freigabe
Name	Gerätename RDT2	Beginn 01.10.2009 12:33:12	Prozessbeurteilung Zufriedenstellend
Straße	Firma Miele & Cie. KG	Ende 01.10.2009 13:49:41	Produktfreigabe Ja
Postleitzahl	Typ Profitronic	Dauer 01:16:29	Freigegeben durch PDI INVITEC
Stadt	Version 1.0	Status Zyklus beendet	Freigegeben am 01.10.2009 13:49:42
Land	Herstellernummer 018342823	Chargen-Nr. C003386	
		Programm INSTRUMENTE	

Programmschritt					Benutzerfelder	Indikatoren
	1 (°C)	2 (°C)	3 (°C)	4 (°C)		A0-Wert
Vorspülen I	01.10.2009 12:33:12	50.5	74.8	58.8	instacount load ID 5798	3824s
Vorspülen II	01.10.2009 12:38:53	27.2	66.9	53.5	instacount load RDT2/1:INSTRUME/01.10.2009 12:32	Hitzeresistenz °C 10
Reinigen	01.10.2009 12:46:36	23.4	55.3	44.4	-----	Bezugstemperatur °C 80
Spülen I	01.10.2009 13:05:39	56.9	46.0	48.0	Loading	Starttemperatur °C 65
Spülen II	01.10.2009 13:10:29	35.4	45.4	45.4	1 U-Großfragment AO 1 (BR02.0015.01, S/N=01)	Toleranz °C 0,5
Thermische Desinfektion	01.10.2009 13:14:04	27.5	44.8	42.7	1 U-HTEP Sieb 4 (BR02.0023.04, S/N=04)	Temperaturverteilung °C 3
Trocknung	01.10.2009 13:31:21	91.5	59.3	65.4	1 U-LCP-Schrauben 4,5+6,5 (BR02.0239.01, S/N=01)	
Programmlauf	01.10.2009 13:49:37	59.2	110.1	99.8	1 Einzelinstrumente (BR21.9999.01)	
Zyklus beendet	01.10.2009 13:49:41	59.2	109.3	97.4	-----	
					instacount user PDI	

Statistik		Tmin (1)	Tmax (1)	Tmin (2)	Tmax (2)	Tmin (3)	Tmax (3)	Tmin (4)	Tmax (4)
Programmlauf	00:00:00	59.2	59.2	109.3	109.3	97.4	97.4	88.2	88.2
Vorspülen I	00:05:44	26.7	50.5	66.9	74.8	53.0	59.3	87.2	89.1
Vorspülen II	00:07:42	20.9	27.5	55.3	66.9	44.4	53.5	88.3	88.7
Reinigen	00:19:03	23.3	56.9	44.3	54.9	34.2	49.1	87.3	89.1
Thermische Desinfektion	00:17:17	27.4	93.2	43.2	59.3	41.7	69.8	51.0	89.1
Spülen I	00:04:49	34.4	56.9	45.4	46.5	45.4	49.1	88.3	88.5
Spülen II	00:03:34	26.8	35.4	44.8	45.5	42.7	45.4	88.2	88.3
Trocknung	00:18:17	59.2	91.3	51.5	112.6	34.8	101.5	88.3	89.1

















